


10.3 识别 EIT 模块

EIT 监测需使用电极带、患者电缆、设备电缆与 EIT 模块。请参考电极带附带的使用说明书和下方示意图连接电缆与电极带。

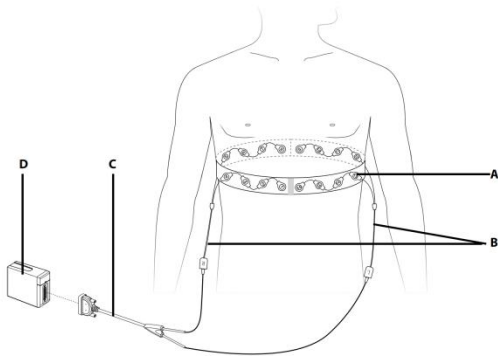

- A. 电极带
- B. 患者电缆
- C. 设备电缆
- D. EIT 模块

10.4 测量步骤

1. 清洁患者部分皮肤，擦除体液或阻碍电极接触的物质，必要时刮除胸毛。
2. 根据患者胸围大小，选择合适的电极带尺寸，确保扣紧电极带时紧贴患者身体。
3. 连接电极带、患者电缆和设备电缆，将患者电缆按扣连接到电极带电极扣上。
4. 如果患者皮肤非常干燥，建议在电极上涂抹电极凝胶或喷洒物，增强通导电性。EIT 测量结束后，注意清除患者皮肤上的残留物。
5. 将电极带系到患者胸部周围，并将其置于锁骨中段第 4 ~ 6 肋骨间隙之间。按扣 1 必须定位在胸骨旁的右胸，按扣 16 必须定位在胸骨旁的左胸。按扣 8 和 9 应位于患者脊柱的两侧。
6. 确保电极带正确固定。
7. 将设备电缆连接到 EIT 模块接口。
8. 将 EIT 模块插入呼吸机插件箱中。